

日

住所 電話

純音聴力に関する特記事項(機種選択、調整、装用耳などで考慮すべきことがあれば記入)

以下の事項については、可能な範囲で記載してください。

3. ことばの聞き取りに関する情報


最高(最良) 語音明瞭度

右耳 _____ % _____ dB

左耳 _____ % _____ dB

最高語音明瞭度の簡易測定法は補聴器適合検査の指針(2010)では、57-S語表を用い、語音の検査音圧は平均聴力レベル上30dBとするが、重度難聴では可能なレベルとすると規定されている。

語音明瞭度曲線

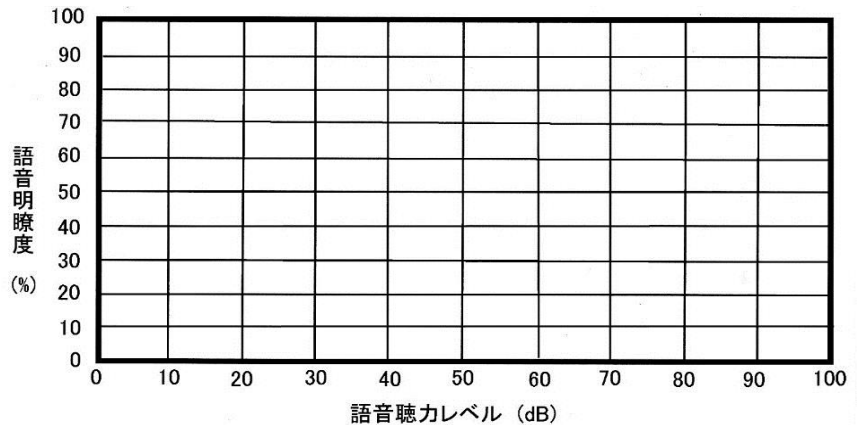

最高(最良)語音明瞭度または語音明瞭度曲線は測定結果があれば記入してください。
測定していない場合は以下の中で該当項目をチェックしてください。

ことばの聞き取り状況(補聴器非装用時)

静かな室内で1m離れての会話

☐ 普通の大きさの声による対面会話は理解可能

☐ 少し大きな声でゆっくり話せば理解可能

☐ 大きな声でゆっくり話せば理解可能

耳元で大声での会話

☐ 理解困難 ☐ 理解可能

大きな騒音のない屋外での会話

☐ 普通の大きさの声による対面会話が理解可能

☐ 大きな声でゆっくり話せば対面会話が理解可能

騒音下での会話の弁別

☐ 極端に悪くなる ☐ 少し悪くなる

4. 装用耳に関する情報

適合耳 ☐ 両耳 ☐ 片耳 (☐ 右耳 ☐ 左耳 ☐ どちらでも可) ☐ 両耳・片耳いずれでも可

☐ 試聴後本人の希望を聞いて決める

補聴器の形態 ☐ 医師の推奨 (☐ 耳あな型 ☐ 耳かけ型 ☐ ポケット型 ☐ なし)

☐ 本人の希望にあわせる

特記事項(とくに重要な指導事項などがあれば記入)

5. 難聴・補聴器に関する情報

本人の補聴器装用希望や意欲 (☐ あり ☐ はっきりしない ☐ 消極的 ☐ なし) ☐ 試聴希望あり

☐ 難聴を家族や他の人に指摘された ☐ 家族や他の人に補聴器装用を奨められた

[特記事項]

・補聴器を必要とする主な場面 (☐ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要)

・補聴器への期待や不安

・価格の希望、使用目的などを含め、とくに重要な指導事項や注意などがあれば記入

6. 補聴器の選択・調整に当たって特に留意すること(過去3ヵ月以内の聴力低下、聴力変動、耳鳴、めまいなどがあれば対応法について記入)

補聴器適合に関する報告書（☐ 右耳用 ☐ 左耳用）

報告書は補聴器1台につき1枚を使用し、新規購入の場合は5以外すべての欄を記入すること
再調整および修理の報告の場合は4、5、7および関連事項を記入すればよい

西暦 年 月 日

先生

認定補聴器専門店
認定補聴器技能者
住 所 電 話

ご紹介いただきましたお客様に補聴器の適合を下記のように実施いたしました。調整後(使用時)の特性図を添付してご報告をいたします。

ふりがな

氏 名 様 年齢 歳 ☐ 男 ☐ 女

1. 適合した耳 ☐ 右耳 ☐ 左耳 ☐ 両耳装用
その理由 ☐ 医師の指示 ☐ 試聴結果 ☐ 本人希望 ☐ 家族希望
☐ その他

2. 選定した補聴器

メーカー名 機種(モデル名)

メーカー希望小売価格 円

☐ 耳あな型 ☐ 耳かけ型 ☐ ポケット型 ☐ 骨導式 ☐ その他

当該機種の最大出力 dB SPL (カタログの表示値)

最大音響利得 dB (カタログの表示値)

使用している機能

☐ ボリューム ☐ 雑音抑制 ☐ 指向性 ☐ ハウリング抑制 ☐ オープンイヤタイプ
☐ Tコイル ☐ ブルートゥース ☐ FM等無線送受信装置 ☐ リモコン

☐ その他の機能

使用しているプログラム(メモリ)数 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

各プログラムの設定内容

プログラム1
プログラム2
プログラム3
プログラム4

選定・販売した補聴器の特徴や機能についての説明(特になければ記入不要)

3. 試聴期間 ☐あり （ 週間 ） ☐なし

4. 装用効果の印象 （ ☐ 両耳装用 ☐ 右耳装用 ☐ 左耳装用 ）

再調整では調整前後でどのように変わったかを記載する。

本人の印象

家族の印象

技能者の印象

5. 再調整または修理についての報告事項(新規購入では記入不要)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. 新規購入についての報告事項(再調整または修理では記入不要)

調整に関った補聴器技能者のコメント

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. 2cm³カプラで測定した特性図を添付すること。

使用時の調整で雑音抑制装置解除または最小の状態で50または60 dBSPL入力から80または90 dBSPL入力まで10 dBごとの出力レベルを測定記録すること。

なお、オープンタイプでは、調整結果のわかるパソコン画面をプリントしたものを添付すること。